



**DAS SMARTE SYSTEM,
DAS IN KEINER MODERNEN
PRAXIS FEHLEN DARF!**

WAS IST AESTHETIC LINER®?

Zahnkorrekturschienen haben sich bei der Behandlung von erwachsenen Patienten* besonders etabliert und stellen bei richtiger Indikation eine sehr effiziente Therapiemöglichkeit dar. In Kombination mit einem fachlich extrem fokussierten Fachlabor für KFO ist der aesthetic liner® sehr vielseitig.

Die glasklare Korrekturschiene aesthetic liner hat sich in unserer eigenen KFO-Praxis PD Dr. M. Sander sehr bewährt. Üblicherweise wird das Behandlungsziel mit maximal acht Schienen je Kiefer nach circa 16 Wochen erreicht.

aesthetic liner® ist die kostentransparente und effiziente Therapie mit glasklaren Schienen, um zum Beispiel klassische Frontzahnfehlstellungen ästhetisch und elegant zu korrigieren. Diese Therapie ist eine interessante Alternative für Patienten, die einen hohen Wert auf Ästhetik während der Behandlung legen.

Erwachsenen Patienten, die herausnehmbare Geräte oder eine Multibracket-Behandlung als unangenehm empfinden, kann bei unserem breiten Indikationsfeld mit den aesthetic liner Schienen sehr gut geholfen werden.

Die Behandlung mit aesthetic liner® ist die Lösung für Erwachsene jeden Alters.



INDIKATION

Perfekt für die am meisten anfallenden kleinen bis mittleren kieferorthopädischen Korrekturen, wie zum Beispiel:

- Beseitigung von Fehlstellungen
- Behandlung von rotierten Zähnen
- Schließen eines Diastemas
- Schließen von Zahnlücken

Über Attachments und längere Schienenfolgen können auch komplexere Fälle erfolgreich behandelt werden.



IN 7 SCHRITTEN ZU EINEM STRAHLENDEN LÄCHELN




SCHRITT 1 BERATUNG IHRES PATIENTEN

Sie besprechen mit Ihrem Patienten die Situation und die persönlichen Wünsche. Danach machen Sie eine digitale oder analoge Abformung. Diese wird mit den Unterlagen Ihres Patienten an unser Labor geschickt (im Dateiformat .stl/.ply/.obj oder auf dem Postweg).

Wenn Sie ohne Beratung einen Schienenauftrag auslösen möchten, können Sie diesen direkt im Online-Auftragsportal eingeben oder das Auftragsformular ausfüllen.

Etwa 75 % unserer Behandlungsfälle sind einfache Fälle und können mit maximal acht Schienen je Kiefer korrigiert werden!

Anteile Behandlungsfälle

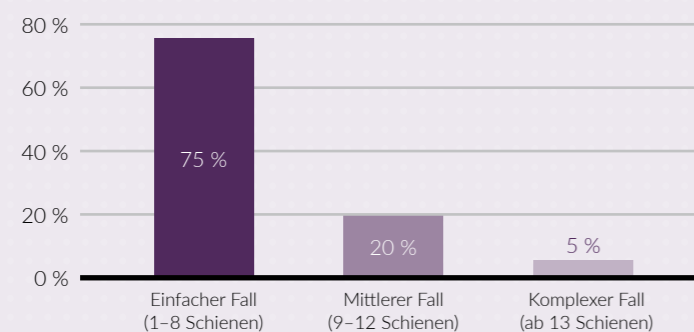

SCHRITT 2 VORABBERATUNG

Unser Hauptanliegen sehen wir in der optimalen **Beratung und Betreuung**. Deshalb ist uns die qualifizierte und ehrliche Beratung Ihres jeweiligen Patientenfalls wichtig.

Nach Eingang Ihrer Unterlagen (Abdrücke/Modelle/Intraoralscans) wird Ihr Fall von unseren Fachberatern für innovative Schienentherapie evaluiert. Sie erhalten von uns eine individuelle, **schriftliche und kostenlose Vorabberatung** inklusive Laborkosten und Heilkostenvorschlag. Diese enthält ebenfalls Angaben zu Behandlungsdauer, Kosten sowie Anzahl der Schienen. Eine Vorher-nachher-Ansicht (auch als 3D-Zielansicht/**Webviewer**) sowie ein Strippingprotokoll bekommen Sie automatisch und ohne Mehrkosten. Diese Dokumente erhalten Sie per E-Mail. Wenn Sie unser Online-Auftragsportal nutzen, hinterlegen wir diese Dokumente auch im Auftragsportal in der digitalen Fallakte.



Jede einzelne Zahnbewegung wird digital geplant. Damit ist sichergestellt, dass die Behandlung wunschgemäß verläuft. Im Rahmen der digitalen Planung simulieren wir den gesamten Behandlungsverlauf, der in einer Vorher-nachher-Ansicht (Webviewer) dargestellt wird. Mit der Vorabberatung erhalten Sie einen **QR-Code** für Ihren Patienten. Der Link führt direkt zu unserem Webviewer. In der dort hinterlegten 3D-Zielansicht sieht der Patient genau, wie schön sein Lächeln nach der Behandlung sein wird.

Sie haben die Möglichkeit, den Honorarkostenvorschlag anzupassen.

Sollte sich herausstellen, dass unsere Aligner-Therapie für Ihren Behandlungsfall nicht zur vollen Zufriedenheit geeignet ist, beraten wir Sie selbstverständlich diesbezüglich und bieten Ihnen mögliche Alternativen an.



Ausgangssituation



Digitale Planung



Ziel (mit dem 3D-Titan-Retainer)



SCHRITT 3 BEAUFTRAGUNG VON SCHIENEN

Wir empfehlen Ihnen die Auftragserteilung über unser **Online-Auftragsportal**. Die intuitive Benutzerführung führt Sie Schritt für Schritt durch die Eingabe.

Sie können Dateien wie zum Beispiel Intraoralscans, Röntgenbilder oder sonstige 3-D-Scandaten uploaden, die Patientenliste einsehen und jederzeit auf Ihre bereits übermittelten Aufträge zurückgreifen, die im Portal abgelegt sind. Die erfassten Auftragsdaten werden sicher in unser System geladen und können direkt bearbeitet werden.

Sollten Sie keine digitalen Daten, sondern Modelle/Abdrücke schicken, haben Sie die Möglichkeit, eine Abholung durch UPS in Ihrer Praxis zu veranlassen. Auch den analogen Auftrag können Sie über unser Online-Auftragsportal abwickeln.



SCHRITT 4 SCHIENENHERSTELLUNG

Sobald sich Ihr Patient für eine Therapie entschieden hat, geben Sie uns den Auftrag über das Portal frei, bitten um einen Rückruf oder senden das Antwortformular an uns zurück. Die ersten acht aesthetic liner® Schienen je Kiefer werden produziert und in einer attraktiven Verpackung geliefert. Für den Patienten liegen eine Trageanleitung, Reinigungstabletten und eine Dose zur Aufbewahrung der Schienen bei.



Modernste Fertigung, höchste Qualität, glasklare Schienen



SCHRITT 5 BEHANDLUNGSSTART

Eine Sequenz von aufeinander abgestimmten Schienen führt zum gewünschten Behandlungserfolg. Bei der nächsten Einbestellung Ihres Patienten setzen Sie die erste Schiene ein. Sie wird für circa zwei Wochen getragen. Gegebenenfalls ist aufgrund Platzmangels eine **Approximale Schmelzreduktion** (Strippen) erforderlich.

Sie erhalten mit Lieferung der Schienen eine entsprechende ASR-Empfehlung*. Dieser können Sie wichtige Hinweise über die optimale Schmelzreduktion während der Behandlung entnehmen. Die dazu benötigten Stripping-Tools erhalten Sie kostenpflichtig von uns.


**ASR-Empfehlungen sind stuhlzeit sparend optimiert*



Stripping-Tools



ASR-Empfehlung

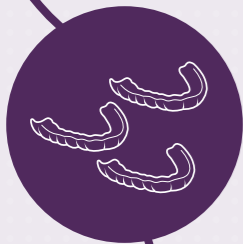



SCHRITT 6

ERREICHEN DES BEHANDLUNGSZIELS

Bestellen Sie Ihren Patienten zu jedem Schienenwechsel ein, um die Zwischenschritte zu kontrollieren. Die Dauer der Behandlung hängt von der Zahnfehlstellung ab. Die einfachen Fälle lassen sich mit meist acht Schienen je Kiefer behandeln. Die Behandlungszeit entspricht bei einem einfachen Fall circa 16 Wochen.

Jede Schiene wird für circa zwei Wochen getragen. Zum Erreichen des Behandlungsziels sollten die Schienen möglichst rund um die Uhr getragen und nur zum Essen, beim Spielen bestimmter Musikinstrumente, bei Kontaktsportarten und zur Zahnhygiene entfernt werden.

Werden für die Korrektur mehr als acht Schienen benötigt, schicken Sie bitte nach der achten Schiene neue Abdrücke/Modelle/Intraoralscans (s. Schritt 1). Der Prozess beginnt dann von vorne.

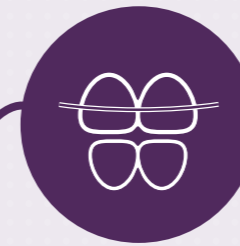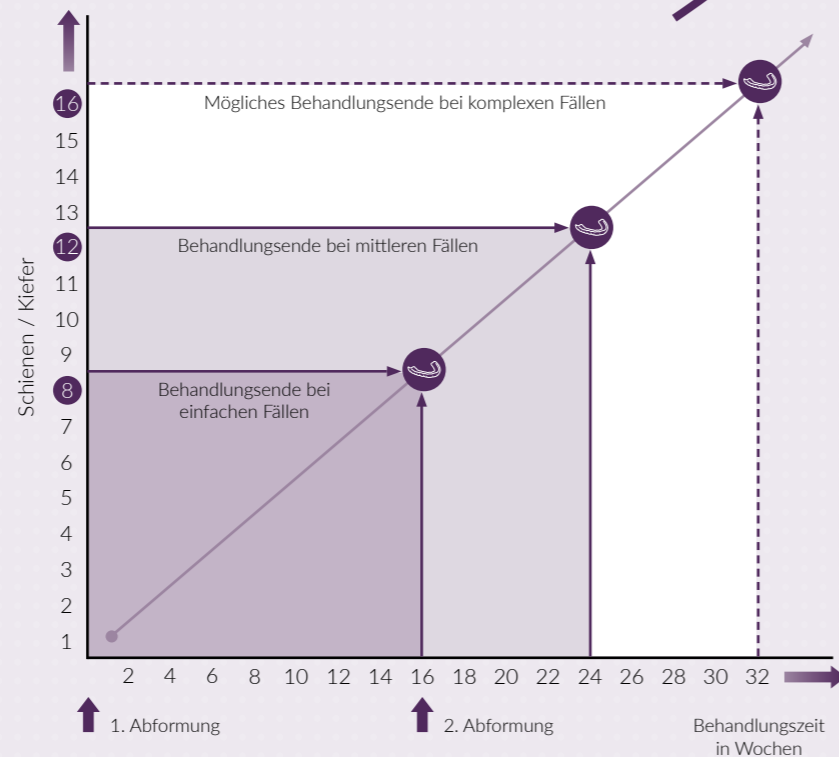

SCHRITT 7

RETENTION

RETAIN³R

Wie nach jeder kieferorthopädischen Behandlung muss auch nach einer Behandlung mit Schienen eine Stabilisierung des Kausystems erfolgen. Empfehlenswert ist ein festsitzender Retainer aus Titan.

Ein passender Retainer ist angenehm und komfortabel zu tragen und weist eine geringe Bruchrate und eine hohe Biokompatibilität auf. Diese Eigenschaften erfüllt der einzigartige **3D-Titan-Retainer**, der zu 100 % digital hergestellt wird. Dank modernster CAD-Industriesoftware wird er virtuell vollständig dreidimensional modelliert.



3D-Titan-Retainer

Auf Basis des Datensatzes wird der Retainer über ein selbst entwickeltes CAM-Verfahren herausgefräst. Mit der Quick-Tray-Übertragungshilfe (indirektes Klebesystem) lässt sich der 3D-Titan-Retainer präzise und komfortabel kleben. Auf Wunsch fertigen wir zusätzlich eine Retentionschiene.

TYPISCHE BEHANDLUNGSBEISPIELE FÜR AESTHETIC LINER[®]

Für einfache, mittlere und teilweise auch komplexere Frontzahnkorrekturen eignet sich aesthetic liner[®] hervorragend.



Einfacher Fall

Mittlerer Fall

Komplexer Fall


AESTHETIC LINER® VEREINT VIELE VORTEILE

FÜR SIE ALS BEHANDELNDER ARZT

- Fachliche und qualifizierte Beratung durch unsere erfahrenen KFO-Experten für innovative Schienentherapie
- Einfacher digitaler Workflow
- **Keine Paketpreise, dafür transparente Kostenkalkulation mit patientenindividueller Berechnung und Maximalpreis-Versprechen**
- Es fallen keine Fall- oder Lizenzgebühren an
- ASR-Empfehlung sowie benötigte ASR-Tools erhalten Sie von uns
- Attraktive Verpackung für die Patienten inklusive Spangendose und Reinigungstabletten

FÜR IHRE PATIENTEN

- Schmerzfremie bzw. schmerzarme Behandlung
- Bereits nach dem Tragen der ersten beiden Schienen sind erste Erfolge sichtbar
- Unauffällig und diskret durch glasklare Schienen mit glänzender Oberfläche
- Hoher Tragekomfort durch passgenaue Fertigung der Schienen im „state of the art“ CAD/CAM-Verfahren
- Leichte Mundpflege
- Metallfrei – auch für Allergiker bestens geeignet
- 3D-Zielansicht (Webviewer)
- Transparente Kosten mit Preisobergrenzen

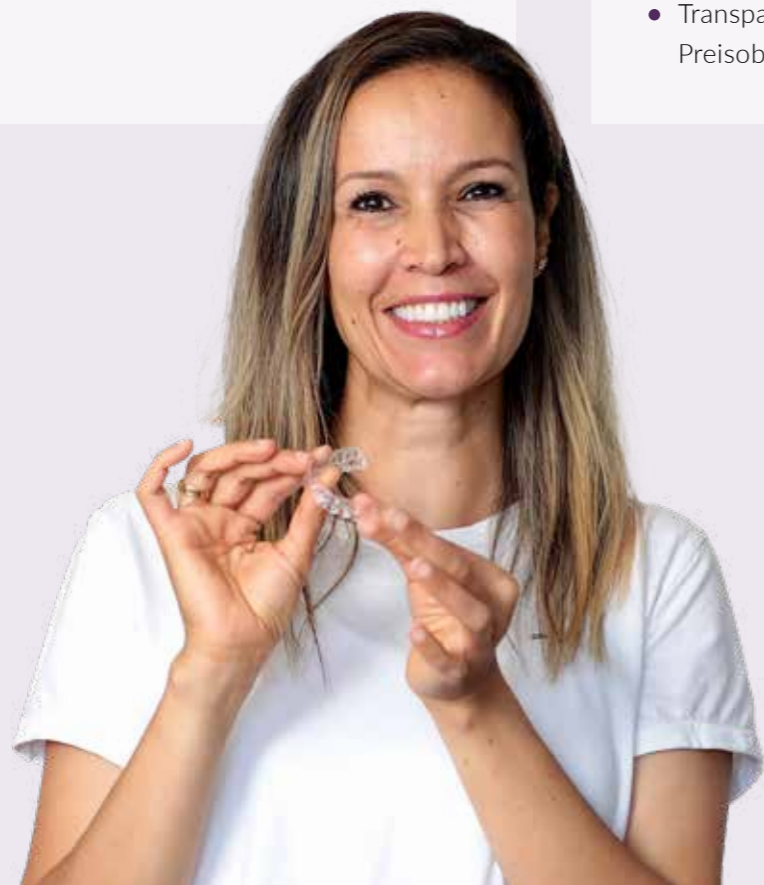

UNSER ZUSÄTZLICHER SERVICE FÜR SIE



DIE BEHANDLUNG MIT DER AESTHETIC LINER® SCHIENE IST GANZ EINFACH:

- 1 Damit es beim Einsetzen garantiert nicht zu Verwechslungen kommt, sind alle Schienen gekennzeichnet und liegen durchnummeriert in der Verpackung.
- 2 Die Trageanleitung für den Patienten liegt in einer hochwertigen Box, die neben der ersten Schiene je Kiefer eine Spangendose enthält. Die Box sowie Reinigungstabletten werden dem Patienten nach dem Einsetzen der ersten Schiene mitgegeben.
- 3 Die **ASR-Empfehlung** ist übersichtlich, **stuhloptimiert** und gibt Ihnen als Behandler die richtige Anleitung, wann Sie an welcher Stelle strippen müssen. Das gibt Ihnen Sicherheit und sorgt für perfekte Platzverhältnisse während der Gesamtdauer der Behandlung.
- 4 Die optimalen Stripping-Tools – passend zur ASR-Empfehlung – erhalten Sie kostenpflichtig bei uns.
- 5 Für ein dauerhaft schönes Behandlungsergebnis empfehlen wir, einen Lifetime-Retainer einzusetzen. Der **3D-Titan-Retainer** ist die perfekte Lösung für Ihre Patienten.
- 6 Wir stellen Ihnen gern auf Anfrage Informationsmaterial für Ihre Patienten zur Verfügung.

Und falls dennoch Fragen auftauchen, stehen Ihnen unsere technischen Fachberater gern mittwochs zwischen 13:00 und 16:00 Uhr telefonisch zur Verfügung. Ihren Termin können Sie bequem online buchen.

Termin
vereinbaren



Fast schon ein Klassiker sind unsere aesthetic liner® **Webinare**. Im Rahmen der einstündigen, kostenlosen und interaktiven Online-Live-Vorträge erfahren Sie u. a. welche Fälle mit den transparenten Schienen behandelt werden können. Ganz ausführlich werden die aesthetic liner® Schienen in unserem **Fortbildungskurs** vorgestellt. Die für diese Technik wichtigsten Grundkenntnisse der Behandlung, der Platzgewinnung und der Retention werden an vielen unterschiedlichen Fällen vermittelt.



MEHR ERFAHREN UNTER:

www.aesthetic-liner.de
info@aesthetic-liner.de



aesthetic liner®
die transparente Zahnkorrekturschiene



DIE AESTHETIC LINER®-SPEZIALLABORE:

Frankfurt am Main

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH
Vilbeler Landstraße 3-5 · 60386 Frankfurt/Main, Germany
Telefon +49 69 94221-0

Online-Auftragsportal: www.kfo2go.de/portal

Potsdam

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH
Potsdamer Straße 176 · 14469 Potsdam, Germany
Telefon +49 331 55070-0

Online-Auftragsportal: www.kfo2go.de/portal

Hamburg

Labor Dr. F. W. Selbach GmbH & Co. KG
Beutnerring 9 · 21077 Hamburg, Germany
Telefon +49 40 761044-0

Online-Auftragsportal: www.selbachportal.de/portal

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.